

Application Data Sheet

No.96

气相色谱系统

己烷和1-己烯中的苯分析系统 GC-2014BZ

本系统用于测定正己烷和1-己烯中的苯（组成范围如下表所示）。样品由AOC-20i 直接进样，经DB-1 柱依次分离后至FID 进行检测。本系统包含Lab-Solution 工作站、热值和密度计算软件。

分析仪相关信息

系统配置：
SPL / 毛细管柱，单FID

样品相关信息：
 C_6H_6

浓度范围：

序号	化合物名称	浓度范围		检测器
		低浓度	高浓度	
1	C_6H_6	1ppm	1000ppm	FID

不同样品的检出限可能存在差异。如需了解更多信息，请联系我们。

系统特点

- 7 分钟完成苯（ C_6H_6 ）分析
- 单 FID 通道
- 重复性好

典型色谱图

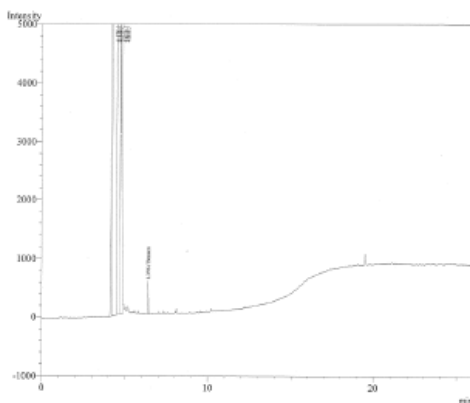


图 FID 的色谱图